


## Cardul de referință al utilizatorului





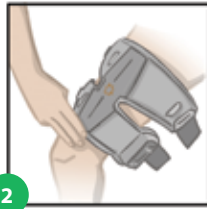

### Punerea jambierei L300 Go Thigh FS

- 1 Umeziți și atașați electrozii pânzați pentru coapsă la jambiera L300 Go Thigh FS.
- 2 Pentru plasare pe mușchiul cvadriceps în timp ce sunteți așezat, plasați jambiera L300 Go Thigh FS pe coapsă poziționând locatorul la trei lățimi de deget de genunchi.
- 3 Asigurați-vă că plasați jambiera L300 Go Thigh FS în poziția de fixare determinată de medicul clinician. Consultați Figura 3.
- 4 Pentru plasarea pe mușchii lojei posterioare a coapsei, în timp ce stați așezat sau în picioare, plasați jambiera L300 Go Thigh FS la cel puțin patru lățimi de deget deasupra părții din spate a genunchiului, chiar sub pliul fesier. Consultați Figura 4.



### Operarea sistemului L300 Go







- 1 Apăsați pe butonul Pornire/Oprire  pentru a porni dispozitivul GIE.
- 2 Selectați modul Pășit sau modul Antrenament:
  - Pentru a selecta modul Pășit, apăsați *scurt* pe butonul de mod .
  - Pentru a selecta modul Antrenament, apăsați și *țineți apăsat* butonul de mod  timp de 3 secunde.Dispozitivul GIE va recunoaște noul mod cu feedback audio și tactil. Pentru a ieși din modul Antrenament, apăsați și *țineți apăsat* butonul de mod  timp de 3 secunde.
- 3 Dacă este necesar, reglați nivelul de intensitate a stimulării apăsând pe butonul Plus  sau Minus .

## Încărcarea bateriilor






Conectați setul de încărcare a sistemului la dispozitivul GIE, apoi la o priză de perete.

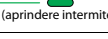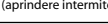

 (aprindere intermitentă)	Bara indicatorului de stare a dispozitivului GIE se aprinde intermitent (roșu), iar indicatorul luminos pentru baterie se aprinde intermitent (galben)	Nivel scăzut de încărcare a bateriei dispozitivului GIE
 (aprindere intermitentă)	Aprindere intermitentă (galben)	Nivel scăzut de încărcare a bateriei
 (aprindere intermitentă)	Aprindere intermitentă (verde)	Încărcare
 (aprindere intermitentă)	Aprindere continuă (verde)	Încărcare completă



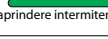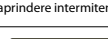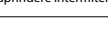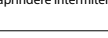


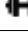

## Afișări pentru dispozitivul GIE



 (aprindere intermitentă)	Aprindere intermitentă (verde)	Sistemul este pornit
 (aprindere intermitentă)	Aprindere intermitentă (verde)	Stimularea este oprită
 (aprindere intermitentă)	Aprindere intermitentă (galben)	Stimularea este pornită
 (aprindere intermitentă)	Aprindere intermitentă (roșu) cu alarmă sonoră	Eroare activă
 (aprindere intermitentă)	Aprindere continuă (roșu)	Funcționare defectuoasă a dispozitivului GIE







## Afișări pentru unitatea de control\*



	Aprindere continuă	Sistemul este pornit
	Unda stimulării este vizibilă	Sistemul este în modul Pășit/Antrenament, stimularea este activată, însă oprită
	Unda stimulării se aprinde intermitent	Sistemul este în modul Pășit/Antrenament, stimularea este activată și pornită
	Se afișează 0-9	Nivelul intensității
	Se afișează pictograma Pășit	Modul Pășit este activat
	Se afișează pictograma Antrenament	Modul Antrenament este activat
	Se afișează pictograma Audio	Semnalizarea sonoră este pornită

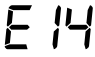\*Componentă opțională

## Afișări pentru erori de sistem

 (aprindere intermitentă)	Contact defectuos al electrozilor. Asigurați-vă că electrozii sunt introduși complet și că dispozitivul GIE este introdus complet în suport. Ștergeți alerta de eroare apăsând pe  sau  pe dispozitivul GIE.	
 (aprindere intermitentă)	Indicator de nivel scăzut de încărcare a bateriei pe dispozitivul GIE. Încărcați sistemul.	 Funcționare defectuoasă a dispozitivului GIE. Apăsați și țineți apăsat butonul  timp de 30 de secunde și apoi reporniți sistemul sau telefonați la Serviciul de asistență tehnică.



**Bioness Inc**  
25103 Rye Canyon Loop  
Valencia, CA 91355  
Telefon: 800.211.9136  
E-mail: info@bioness.com  
Site web: www.bioness.com



**bioness**<sup>®</sup>  
A Bioventus Rehab Company