




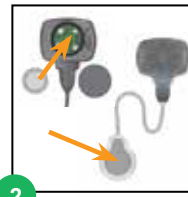

## Asocierea componentelor

**IMPORTANT:** Asociați componentele sistemului înainte de a le asocia cu aplicația pentru clinician

- 1** Jambieră Thigh FS cu jambieră Lower FS.  
Activarea modului Asociere GIE: Apăsăți simultan butoanele Plus și Minus pe fiecare dispozitiv GIE. Indicatorul luminos pentru starea dispozitivului GIE se va aprinde intermitent verde-galben-roșu.
- 2** Dacă este necesar, asociați senzorul pentru picior la dispozitivul GIE pentru jambiera Lower FS.  
Senzor pentru picior Activarea modului Asociere: Asociați senzorul pentru picior la un dispozitiv GIE nou plasând o baterie (CR2032) în senzorul pentru picior și apăsând pe senzorul de presiune. Indicatorul luminos de culoare verde se va aprinde intermitent pentru a confirma activarea modului Asociere. Plasați dispozitivul GIE inferior în modul Asociere.




## Asocierea sistemului cu aplicația pentru clinician

- 1** Conectați-vă la aplicația pentru clinician L300 Go
- 2** Selectați  pentru a accesa ecranul Legătură. Plasați sistemul în modul Asociere apăsând simultan butoanele Plus și Minus de pe dispozitivul GIE. Selectați  pictograma Legătură de deasupra piciorului dorit. După finalizarea asocierii, ieșiți din ecranul Legătură făcând clic pe .
- 3** Selectați un pacient *adică Lucru cu pacient existent, Creare nou sau Alegere din listă*. Dacă selectați din lista de pacienți, apăsați pe  pictograma Încărcare sau faceți dublu clic pe numele ales.



## Fixarea sistemului L300 Go

- 1** Atașați panoul personal.
- 2** Glisați capacul benzii personale peste banda jambierei.
- 3** Ștergeți zona de stimulare cu o cârpă moale umezită. Apoi, extindeți ușor partea inferioară a piciorului.
- 4** După ce electrozii sunt atașați la jambiera L300 FS, plasați jambiera pe picior utilizând locatorul de rotulă al jambierei, fixați banda și ajustați tensionarea.
- 5** Programați setările de stimulare pentru a se obține răspunsul dorit.

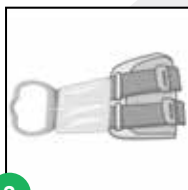














## Fixarea sistemului L300 Go Thigh

- 1 Umeziți electrozii pânzați pentru coapsă și fixați-i în jambieră.
- 2 Ștergeți zona de stimulare cu o cârpă moale umezită. Plasați jambiera pe coapsă, la nu mai puțin de trei lățimi de deget de fosa popliteală (aplicație pentru mușchii lojei posterioare a coapsei) sau de rotulă (aplicație pentru cvadriceps).
- 3 Centrați jambiera pe linia mediană a coapsei. Strângeți benzile.
- 4 Programați setările de stimulare cu pacientul așezat pentru a obține răspunsul dorit.
- 5 Dacă este necesar, ajustați setările de stimulare cu pacientul în picioare.



## Programarea sistemului L300 Go

- 1  Programați setările pentru modul Stimulare. Selectați dispozitivul GIE din panoul de control pentru stimulare. Selectați tipul de electrod (în imagine este arătat ecranul pentru electrod direcțional).  Cu pacientul așezat, apăsați pe  Test pentru a porni stimularea pe dispozitivul GIE selectat. Ajustați setările de stimulare pentru a se obține răspunsul dorit. Apăsați pe Test pentru a opri stimularea. Repetați pasul pentru toate dispozitivele GIE conectate.
- 2  Programați setările pentru modul Pășit. Apăsați  pe pictograma Ecran mod Pășit. Apăsați pe pictograma  Undă stimulare pentru a activa modul Pășit. Observați mersul pacientului și ajustați setările după cum este necesar. Apăsați pe pictograma  Undă stimulare pentru a opri stimularea.
- 3  Programați setările pentru modul Antrenament . Apăsați pe pictograma Ecran mod Antrenament. Ajustați setările pentru modul Antrenament, inclusiv excluderea unui anumit dispozitiv GIE, după cum doriți. Apăsați pe pictograma Antrenament pentru a porni stimularea pe toate dispozitivele asociate care sunt incluse în modul Antrenament. Apăsați pe  pictograma Antrenament pentru a opri stimularea.
- 4 La sfârșitul fiecărei sesiuni, deconectați sistemul navigând la  ecranul Legătură și apăsând pe  pictograma Anulare legătură. Părăsiți aplicația pentru clinician.

*Notă: Apăsați și țineți  apăsată pictograma Stimulare manuală pentru a activa stimularea pe toate dispozitivele GIE asociate și active în timp ce butonul este apăsat.*

