





Párování komponent

DŮLEŽITÉ: Před párováním s klinickou aplikací nejdříve spárujte komponenty systému.

- 1 Manžeta pro stehno s manžetou pro dolní část nohy.
Aktivace režimu párování EPG: U každého EPG podržte současně tlačítka plus a minus. Světelná kontrolka stavu EPG začne zeleně, žlutě a červeně blikat.
- 2 V případě potřeby spárujte nožní snímač s EPG manžety pro dolní část nohy. **Aktivace režimu párování chodidlového senzoru:** Chodidlový senzor s novým EPG spárujete tak, že do chodidlového senzoru vložíte baterii (CR2032) a stisknete tlakový senzor. Aktivace režimu párování se projeví blikajícím zeleným světlem. Přepněte EPG pro dolní část nohy do režimu párování.



Párování systému s aplikací klinického programátoru Bioness

- 1 Přihlaste se do aplikace klinického programátoru Bioness.
- 2 Výběrem tlačítka  přejděte na obrazovku připojení. Současným podržením tlačítek plus a minus na EPG přepněte systém do režimu párování. Vyberte **ikonu připojení**  nad požadovanou nohou. Po spárování zavřete obrazovku připojení kliknutím na tlačítko .
- 3 Vyberte pacienta. Slouží k tomu možnosti **práce s existujícím pacientem, vytvoření nového nebo výběru ze seznamu**. Při výběru ze seznamu pacientů stiskněte **ikonu načtení**  nebo dvakrát klikněte na zvolené jméno.



Upevnění systému L300 Go

- 1 Připojte osobní panel.
- 2 Přetáhněte kryt osobního popruhu nad popruh manžety.
- 3 Vyčtete oblast stimulace vlhkým měkkým hadříkem. Poté velmi mírně natáhněte dolní část nohy.
- 4 Jakmile budou elektrody (nebo elektroda) připojeny k manžetě systému L300 Go, umístěte manžetu na nohu pomocí lokátoru česky manžety, upevněte popruh a upravte jeho utáhnutí.
- 5 Naprogramujte nastavení stimulace, aby odpovídala požadovanému výsledku.



Úplný přehled všech kontraindikací, varování, nežádoucích reakcí, preventivních opatření a pokynů pro péči najdete v uživatelské příručce.


L300 Go® Wireless, Bioness, logo společnosti Bioness® a LiveOn® jsou ochrannými známkami společnosti Bioness Inc. ve Spojených státech amerických nebo dalších zemích. | www.bioness.com

Upevnění systému L300 Go pro stehno samostatně

- 1 Navlhčete textilní elektrody pro stehno a připněte je k manžetě.
- 2 Vytřete oblast stimulace vlhkým měkkým hadříkem. Umístěte manžetu na stehno, minimálně ve vzdálenosti tří šířek prstu od zákolenní jamky (při aplikaci na zadní části stehna) nebo kolenní česky (při aplikaci na přední části stehna).
- 3 Vycentrujte manžetu tak, aby na stehně byla rovně. Upevněte popruhy.
- 4 Naprogramujte nastavení stimulace, zatímco pacient sedí, tak, aby odpovídala požadovanému výsledku.
- 5 V případě nutnosti upravte nastavení stimulace, zatímco pacient bude stát.



1

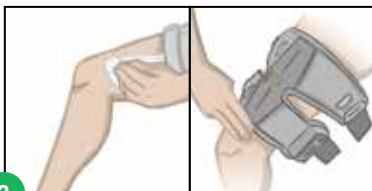

2















3



4

Programování systému L300 Go

- 1  **Naprogramujte nastavení stimulace.** Na řídicím panelu stimulace vyberte požadovaný EPG. Vyberte typ elektrody (na obrázku je obrazovka řídicí elektrody). Zatímco pacient sedí, zapněte stimulaci stisknutím tlačítka **Test**  na vybraném EPG. Upravte nastavení, aby odpovídala požadovanému výsledku. Stisknutím tlačítka **Test**  zastavte stimulaci. Opakujte postup pro všechny připojené EPG.
- 2  **Naprogramujte nastavení chůze.** Stiskněte **ikonu obrazovky chůze**. Stisknutím **ikony vlny stimulace**  povolte režim chůze. Pozorujte chůzi pacienta a podle potřeby nastavení upravte. Stisknutím **ikony vlny stimulace**  zastavte stimulaci.
- 3  **Naprogramujte nastavení tréninku.** Stiskněte **ikonu obrazovky tréninku** . Upravte nastavení tréninku včetně vyloučení konkrétních EPG v případě potřeby. Stisknutím **ikony tréninku** zapněte stimulaci na všech spárovaných zařízeních, která jsou do režimu tréninku zahrnuta. Stisknutím **ikony tréninku**  zastavte stimulaci.
- 4 Na konci každého sezení systém odpojte přechodem na obrazovku připojení  a stisknutím **ikony odpojení** . Ukončete klinickou aplikaci.

Poznámka: Stisknutím a podržením ikony ruční stimulace  aktivujete stimulaci na všech spárovaných a aktivních EPG po dobu, kdy bude tlačítko stisknuté.



1



2



3



4



Bioness Inc.
25103 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355
Telefon: +1 800 211 9136
E-mail: info@bioness.com
Web: www.bioness.com



bioness[®]

A Bioventus Rehab Company

612-01036-001 Rev. D 12/2022